

HOSPITALARIO

CAMAS ORTOPÉDICAS MANUALES



CAMA ORTOPÉDICA MANUAL ESTÁNDAR:

Respaldo y piecero desmontable. 4 planos con 3 articulaciones.

Lechos rígidos, aptos para RCP. Regulable con manivelas telescópicas.

Barandas desmontables. Incluye porta suero.

CAMA ORTOPÉDICA MANUAL DELUXE:

4 planos con 3 articulaciones. Lechos rígidos, aptos para RCP.
Regulable con manivelas telescópicas. Barandas plegables retráctiles.

Incluye porta suero. Parilla inferior portaobjetos.

Ruedas con frenos.



HOSPITALARIO

CAMAS ORTOPÉDICAS MOTORIZADAS



CAMA ORTOPÉDICA MOTORIZADA DELUXE II:

Chasis de acero pintado, plegable y transportable sobre cuatro ruedas giratorias reforzadas, con frenos. Lecho tubular pintado con flejes rígidos. Cabecera y piecera desmontables, fabricadas en melamina. Barandas de madera, regulables en altura y desmontables. Trapecio regulable en altura, para uso derecho o izquierdo.

Movimientos motorizados "Linak" con control remoto: Regulación de ángulo de respaldo: 0-83°. Regulación de ángulo de rodilla: 0-20°. Regulación de altura de lecho: 40-80cm. Regulación de ángulo de lecho: Anti-Trendelenburg.

CAMA ORTOPÉDICA MOTORIZADA DELUXE:


Chasis de acero pintado, plegable y transportable sobre cuatro ruedas giratorias reforzadas, con frenos. Lecho tubular pintado con flejes rígidos. Cabecera y piecera desmontables. Barandas, regulables en altura y desmontables.

Movimientos motorizados con control remoto: Regulación de ángulo de respaldo: 0-83°. Regulación de ángulo de rodilla: 0-20°. Regulación de ángulo de lecho: Anti-Trendelenburg. Ruedas con frenos.



HOSPITALARIO

COLCHONES ESTÁNDAR

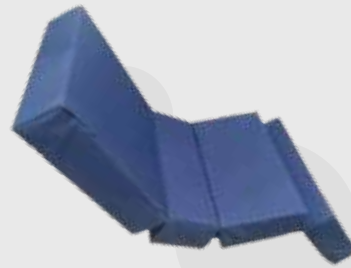

COLCHÓN ORTOPÉDICO ARTICULADO:

Confeccionado en espuma Soft, otorga una muy buena distribución de las presiones que ejerce el cuerpo sobre el colchón. Incluye funda de nylon-poliéster impermeable. Costuras termo-selladas, garantizando una barrera efectiva contra las bacterias. Fácil limpieza y sanitización con paños húmedos.

COLCHÓN ORTOPÉDICO ESTÁNDAR:

Confeccionado en espuma Soft, otorga una muy buena distribución de las presiones que ejerce el cuerpo sobre el colchón. Incluye funda de nylon-poliéster impermeable. Costuras termo-selladas, garantizando una barrera efectiva contra las bacterias. Fácil limpieza y sanitización con paños húmedos.



HOSPITALARIO

COLCHONES ANTIESCARAS



Colchón de aire antiescarante con celdas de aire interconectadas.

Compresor secuencial de inflado y desinflado automático, permitiendo la variación constante de los puntos de apoyo, ayudando así a la mejor circulación y evitando escaras. Funcionamiento las 24hs con bajo consumo eléctrico. Colchoneta fabricada en PVC flexible con 2 extensiones, para colocar debajo del colchón. Incluye mangueras de conexión, parches y pegamento para reparación de colchoneta. Apto para camas ortopédicas. Debe ser colocado sobre un colchón de goma espuma tradicional.

Colchón de aire antiescarante reforzado para pacientes de hasta 150kg.

Compresor secuencial de inflado y desinflado automático, permitiendo la variación constante de los puntos de apoyo, ayudando así a la mejor circulación y evitando escaras. Funcionamiento las 24hs con bajo consumo eléctrico. Colchoneta fabricada en PVC flexible con 2 extensiones, para colocar debajo del colchón. Incluye mangueras de conexión, parches y pegamento para reparación de colchoneta. Apto para camas ortopédicas.

Debe ser colocado sobre un colchón de goma espuma tradicional.



HOSPITALARIO

LIFT HIDRÁULICO



LIFT HIDRÁULICO QUICK DRIVE:

Estructura de acero. Terminación: Pintura epoxi

Montado sobre cuatro ruedas giratorias. Ruedas delanteras de 7,5 cm

Ruedas traseras de 10 cm con frenos. Mecanismo para apertura y cierre de patas para pasar por puertas estrechas. Bomba hidráulica giratoria

Manijas cómodas para un fácil manejo del equipo. Soporte de arnés giratorio

360°. Elección de tipo y tamaño de arnés como accesorio. Diseñado para levantar

y transportar pacientes de hasta 150Kg. Altura máxima de las patas para ingresar debajo de la cama: 11,5 cm.

HOSPITALARIO

LIFT MOTORIZADO



LIFT MOTORIZADO QUICK DRIVE:

Estructura de acero. Controlado mediante panel de control ubicado sobre el motor central o con control remoto. Terminación: Pintura epoxi. Montado sobre cuatro ruedas giratorias. Ruedas delanteras de 7,5 cm. Ruedas traseras de 10 cm con frenos. Mecanismo para apertura y cierre de patas para pasar por puertas estrechas. Manijas cómodas para un fácil manejo del equipo. Soporte de arnés giratorio 360°. Elección de tipo y tamaño de arnés como accesorio. Diseñado para levantar y transportar pacientes de hasta 150Kg. Altura máxima de las patas para ingresar debajo de la cama: 11,5 cm.